

Differentialdiagnostik und Bestätigung autoimmuner Hepatitiden

Liver ViraStripe®

Der Liver ViraStripe® ist ein Immunoassay zur Differenzierung und Bestätigung chronischer Lebererkrankungen, wie der Autoimmunen Hepatitis (AIH) Typ 2 bzw. Typ 3 und der Primären Biliären Zirrhose (PBC).

Der Liver ViraStripe® dient als qualitativer Nachweis von IgG Autoantikörpern gegen spezifische, diagnostisch relevante Leber-Antigene. Jeder Streifen bietet höchste Zuverlässigkeit durch ein integriertes Kontrollsystem.

Hinweis auf AIH Typ 2

Antikörper gegen Leber-Nieren-Mikrosomen


Hinweis auf AIH Typ 3

Antikörper gegen lösliches Leberantigen

Hinweis auf PBC

Antikörper gegen Pyruvatdehydrogenase Komplex des M2 Typs (Anti-Mitochondrien)

Antikörper gegen Leber Zytosol Antigen Typ 1

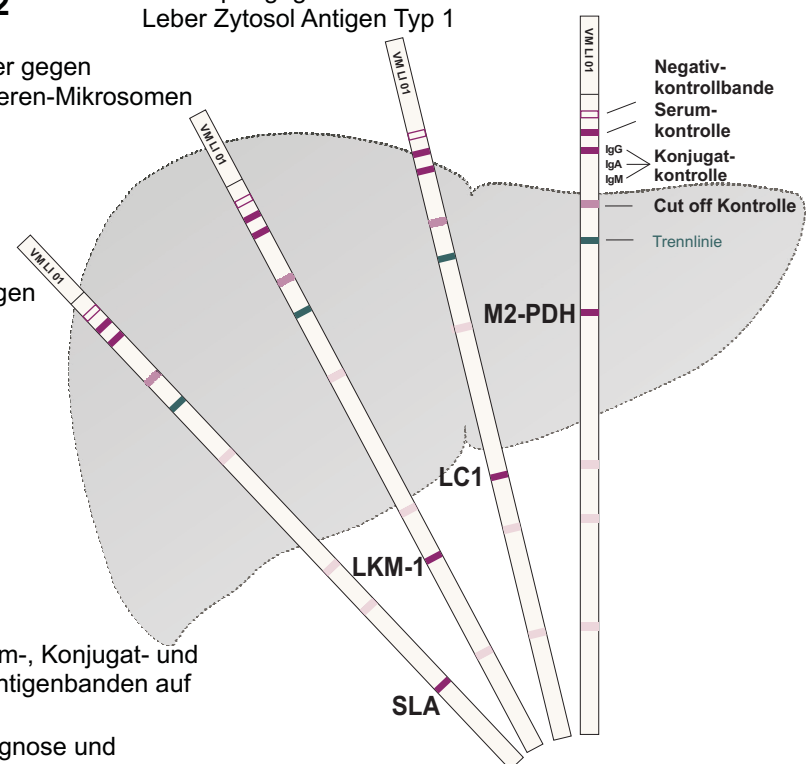

Leber ViraStripe®


Sicher Negativkontrollbande, Serum-, Konjugat- und Cut off- Kontrollen sowie Antigenbanden auf einem Streifen

Praktisch Ein Streifen - Differentialdiagnose und Bestätigung autoimmuner Hepatitiden

Einfach Auswertung über definierte Bandenpositionen und standardisierte Evaluierung mit ViraScan®


Schnell Zuverlässige Ergebnisse in 90 Minuten

Liver ViraStripe®
ein Streifen - viele Vorteile




Best.-Nr.:	V-LISGSK	Liver ViraStripe® IgG Testkit	25 Teste	V-LISGPK	Positives Kontrollserum IgG	330 µl
	V-UVNGKI	Antihuman IgG Konjugat	9 ml	V-LISGNK	Negatives Kontrollserum IgG	330 µl

Differentialdiagnostik der autoimmunen Hepatitiden Serologischer Autoantikörper Nachweis

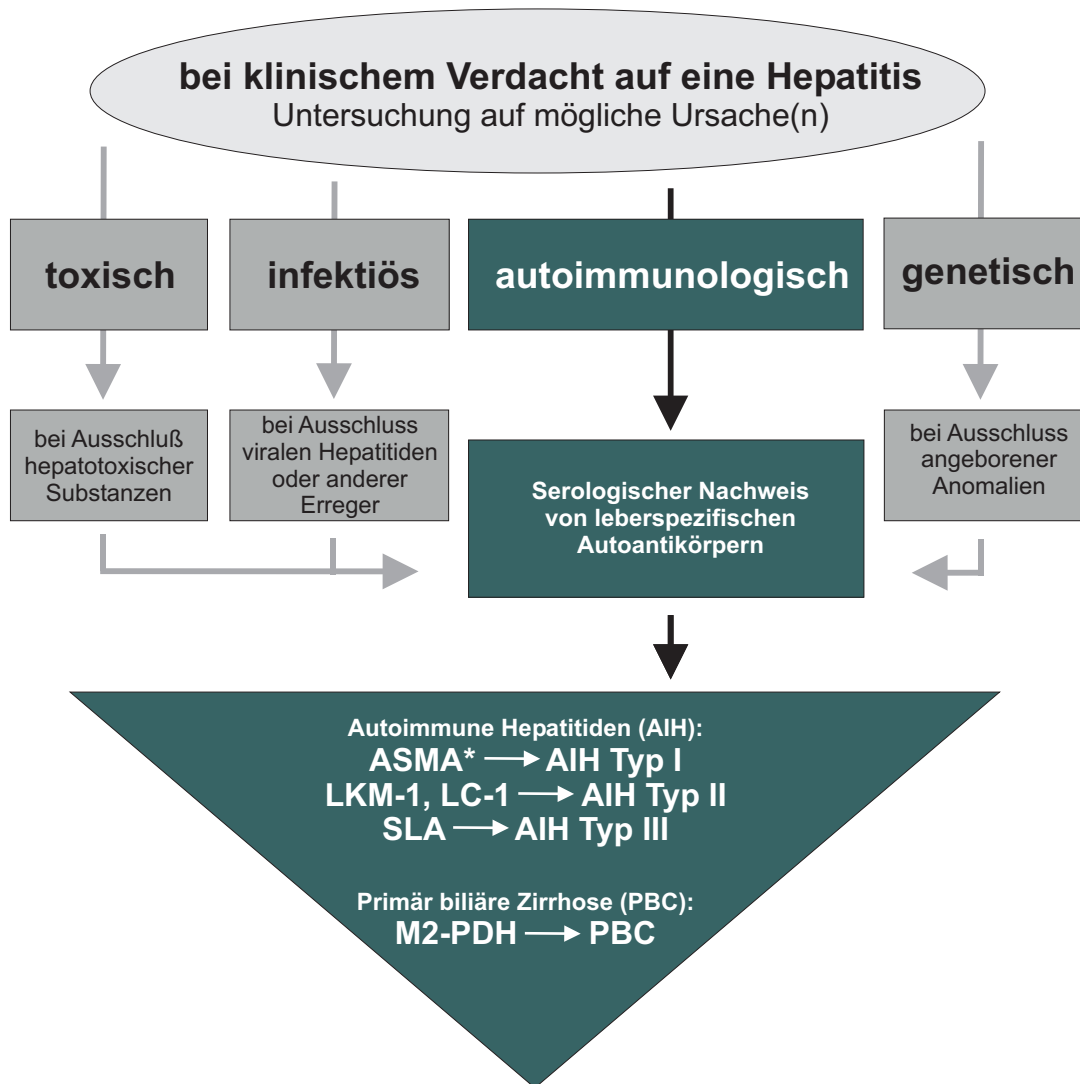

Liver ViraStripe®

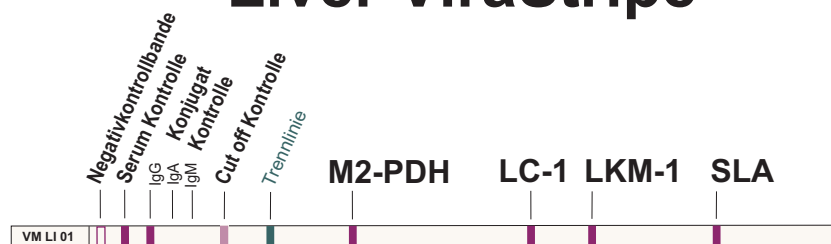

Best.-Nr.:	V-LISGSK	Liver ViraStripe® IgG Testkit	25 Teste	V-LISGPK	IgG positives Kontrollserum	330 µl
	V-UVNGKI	Antihuman IgG Konjugat	9 ml	V-LISGNK	IgG negatives Kontrollserum	330 µl

* C2196L	Dreifachschnitt IFT Testkit	96 Teste	Rattenleber/-niere/-magen
----------	-----------------------------	----------	---------------------------

2199_LiverViraStripe_Stufendiagnostik_de.cdr

ViraStripe® ist ein registriertes Warenzeichen der VIRAMED Biotech AG

© Copyright VIRAMED Biotech AG August 2012